

ÜCRETSİZ YEDEK PARÇALAR (GARANTİ)

Tutma kayışı, konfor bantları ve garantisi dolmuş yedek parçalar dışında tüm parçalar 36 ay garantili olup ücretsiz olarak gönderilir. (Firmamızın Genel Şirket Şartnamesine bakınız):

- Fatura tarihine bakarak PeniMaster® aletinizin 3 yıldan eski olup olmadığını kontrol edin.
- Anızal parçayı, faturanın bir kopyası ile birlikte paketin üzerine yeterli miktarda pul yapıştırarak aşağıdaki adrese postalayınız. VEYA
- Fatura belgesinden iyi derecede okunabilir dijital bir kopya yapın (örneğin tarayıcı ile) ve arızalı parçanın arızalı bölümü açıkça görülecek şekilde fotoğrafını çekin. Fatura kopyası ve fotoğrafı .jpg- ve/veya .gif-dosyası olarak şu e-mail adresine gönderin:
→ www.penis.de

TUTMA KAYIŞLARI, KONFOR BANTLARI VE GARANTİSİ DOLMUŞ PARÇALAR

Tutma kayışları, konfor bantları ve garantisi dolmuş aletler için yapılacak yedek parça siparişlerinde şu internet adresini kullanın: www.penis.de/yedek-parcalar

GRATIS RESERVEDELE (GARANTİ)

I 36 måneder erstatter vi alle dele med gratis reserve dele undtagen holde remme, komfortbånd og reserve dele med forfalden garanti (se vore AGB):

- Kontrollér med hjælp af fakturadatoen om din PeniMaster® er ældre end 3 år.
- Returnér defekte del sammen med en fakturakopi til nedestående adresse. Husk tilstrækkelig porto. ELLER
- tilsend os en tydelige læselig (bedre læselig) digital fakturakopi (fx ved hjælp af en scanner) og et billede af defekte del, hvorpå defekten tydeligt kan ses. Tilsend begge dokumenter som jpg- og/eller gif-filer til:
→ www.penis.de

HOLDEREM, KOMFORTBÅND OG RESERVEDELE MED FORFALDEN GARANTİ

Bestil holderemme, komfortbånd eller også reserve dele til apparater uden garantikrav på følgende hjemmeside www.penis.de/reserve dele

KOSTELOZE RESERVEONDERDELEN (GARANTIE)

U ontvangt gedurende 36 maanden kosteloze reserveonderdelen met uitzondering van de houderriemen, comfortbanden en reserveonderdelen met afgelopen garantie (zie onze Algemene Voorwaarden):

- Controleer met behulp van de factuurdatum dat uw PeniMaster® niet ouder dan 3 jaar is.
- Stuur het defecte onderdeel samen met een kopie van de factuur in een voldoende gefrankeerd poststuk naar beneden vermeld adres. □F
- Maak een goed leesbare digitale kopie van uw factuur (bijv. met een scanner) en een foto van het defecte onderdeel waarop het defect duidelijk te herkennen is. Stuur de twee documenten als .jpg- en/ of .gif-bestanden naar: → www.penis.de

HOUDERRIEMEN, COMFORTBANDEN EN RESERVEONDERDELEN MET AFGELOPEN GARANTIE

Gebruik voor de bestelling van reserveonderdelen voor toestellen zonder garantierecht, houderriemen of comfortbanden het volgende internetadres: www.penis.de/onderdelen



Gebruiksaanleitung! Bitte aufmerksam lesen! Instructions for use! Please read carefully. Mode d'emploi. Veuillez lire attentivement avant utilisation! Istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima dell'uso! Instrucciones de uso. ¡Leer atentamente antes de usarlo! Manual de instruções! Leia com atenção! Lutfen kullanna klavuzunu dikkatlice okuyunuz! Betjeningsvejledning! Læses opmærksomt! Gebruiksaanwijzing! A. u. b. zorgvuldig doorlezen! Bruksanvisning! Läs igenom uppmärksamt! Návod k použití! Prosíme čtěte pozorně! Руководство по применению! Пожалуйста, прочтеть внимательно!

PENIMASTER®



Zur dauerhaften Penisvergrößerung und -begradigung For permanent penis enlargement and straightening Pour un allongement et une correction durable du pénis Per un ingrandimento ed un raddrizzamento del pene duraturi Para agrandar y reajustar la curvatura del pene de manera duradera Para aumentar e endireitar o pénis de forma duradoura Kalıcı penis büyüme ve düzeltme için Til varig penis forstørrelse og udbedring af krumning Voor een duurzame penisvergroting en -correctie För varaktigt penisförstoring och -uträtning Pro trvalé zvětšení a napřimení penisu Для долговременного увеличения и Для долговременного увеличения и

 **WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE UND ERFOLG MIT IHREM PENIMASTER®!**

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.penis.de

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Es gelten unsere AGBs. Stand dieser Information: 04/2008

 **WE HOPE YOUR PENIMASTER® LEADS TO GREAT SUCCESS AND SATISFACTION!**

You can find further information on the internet at www.penis.de

We reserve the right to make changes that constitute technical improvements (See our general terms and conditions). Date of this information: 04/2008

 **NOUS ESPÉRONS QUE LE PENIMASTER® VOUS APPORTERA PLAISIR ET SATISFACTION!**

Informations complémentaires sur Internet: www.penis.de

Sous réserve de modifications susceptibles d'apporter une amélioration technique. Version de ces informations: 04/2008

 **LE AUGURIAMO OGNI SUCCESSO CON IL SUO PENIMASTER®!**

È possibile trovare ulteriori informazioni in internet al sito www.penis.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Valgono le nostre condizioni generali d'affari. Stato della presente nota informativa: 04/2008

 **¡LE DESEAMOS TODO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN QUE MERECE CON SU PENIMASTER®!**

Información más detallada disponible en Internet en la página www.penis.de

Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas.

Rígen nuestras CGC. Actualización de la presente información: 04/2008

 **ESPEREMOS QUE FIQUE SATISFEITO COM O PRODUTO E OBTENHA BONS RESULTADOS COM PENIMASTER®!**

Para mais informações, consulte o na Internet o website: www.penis.de

Estão reservadas as alterações que sirvam propósitos técnicos. São válidas as nossas condições gerais de venda. Estado deste informação: 04/2008

MSP Concept GmbH & Co. KG
Emser Straße 39 d · D-10719 Berlin
www.penis.de
Deutschland: 030 23 63 85 65
Worldwide: 0049 30 23 63 85 65

 **RESERVDelar KOSTNADSFRI (GARANTI)**
Så får Du 36 månaders utbytesrätt på alla delar med undantag för remmar, komfortband och reservdelar med utgången garantitid (se våra garantier):

- Bedöm med hjälp av räkningsdatumet om Din PeniMaster® inte är äldre än 3 år.
- Skicka den defekta delen tillsammans med en kopia på inköpsräkningen och tillräckligt frakterad till nedanstående adress. ELLER
- Gör en väl läslig (förbättrat läslig) digital kopia av din räkning (t. ex med en scanner) och ett foto på den defekta delen, på vilket defekten syns tydligt. Skicka båda dokumenten som .jpg- och/eller .gif-filer till:
→ www.penis.de

HÅLLREMMAR, KOMFORTBAND OCH RESERVDelar MED UTGÅNGEN GARANTI.

Vid beställning av reservdelar till utrustning utan garantianspråk, hållremmar eller komfortband, Vänligen använd följande Internetadress: www.penis.de/reservdelar

 **BEZPLATNÉ NÁHRADNÍ DÍLY (ZÁRUKA)**

Takto obdržíte 36 měsíců bezplatnou náhradu na všechny díly s výjimkou tržmenových držáků, komfortních pásků a náhradních dílů s prošlou zárukou (viz naše VOP):

- Zkontrolujte na základě data účtenky, zda Váš PeniMaster® není starší než 3 roky.
- Zašlete defektní díl společně s kopií dokladu o koupi správně ofrankovanou zásilkou na niže uvedenou adresu. НЕВО
- Vytvořte dobře čitelnou digitální kopii Vašeho účtu (např. skenerem) a fotografii defektního dílu, na které je zřetelně rozeznatelná závada. Zašlete oba dokumenty jako soubory .jpg a/nebo gif na:
→ www.penis.de

TRŽMENOVÉ DRŽÁKY, KOMFORTNÍ PÁSKY A NÁHRADNÍ DÍLY S PROŠLOU ZÁRUKOU

Prosíme, použijte pro objednávání náhradních dílů pro přístroje bez nároku na záruku, tržmenové držáky nebo komfortní pásky následující internetovou adresu: www.penis.de/nahradni-dily

 **БЕСПЛАТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ (ГАРАНТИЯ)**


Таким образом, Вы получаете 36 месяцев на бесплатную замену всех деталей за исключением удерживающих ремней, поясков комфорта и запасных деталей с истекшим сроком гарантии (смотри наши Общие условия заключения торговых сделок):

- С помощью даты выписки счета проверьте, не прошло ли со времени покупки Вашего аппарата ПениМастер® более трех лет.
- Пошлите с оплаченным почтовым сбором дефектную деталь вместе с копией фактуры покупки по нижеуказанному адресу. ИЛИ
- Выполните четкую (лучше разборчивую) цифровую копию Вашего счета (например, с помощью сканирующего устройства) и фотографию дефектной детали, на которой можно отчетливо распознать дефект. Пошлите оба документа в форме файлов .jpg и/или .gif по адресу: → www.penis.de

УДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕМНИ, ПОЯСКИ КОМФОРТА И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ГАРАНТИИ

Пожалуйста, для того чтобы заказать запасные детали для аппаратов без права на гарантийный ремонт, удерживающие ремни или пояски комфорта, используйте следующий адрес в Интернете: www.penis.de/spare-parts-russian



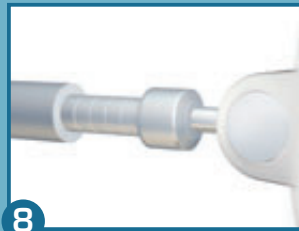

SIZE PENIMASTER® İLE MUTLULUK VE BAŞARI DILIYORUZ!

Daha detaylı bilgileri internette www.penis.de adresinde bulabilirsiniz.

Teknik geliştirme nedeniyle değişiklik yapma hakkı saklı tutulur. Firmamızın Genel Şirket Şartnamesi geçerlidir. Bu bilgilerin güncelliği: 04/2008



DU ØNSKES MEGET GLÆDE OG SUCCESSION MED DIN PENIMASTER®!

Yderligere informationer står på vor hjemmeside www.penis.de

Ændringer, der tjener tekniske forbedringer, forbeholdes. Vore almindelige forretningsbetingelser (AGB) er gældende. Stand af denne information: 04/2008



WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCESSION MET UW PENIMASTER®!

Verdere informatie vindt u op het internet op www.penis.de

Wijzigingen met het oog op de technische vooruitgang voorbehouden. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing. Datum van deze informatie: 04/2008



VI ÖNSKAR DIG MYCKET GLÄDJE OCH FRAMGÅNG MED DIN PENIMASTER®!

Ytterligare information finner du på Internet under www.penis.de

Vi reserverar oss för sådana ändringar uppkomna genom den tekniska utvecklingen. Det gäller våra garantier. Denna information finns på: 04/2008



PŘEJEME VÁM MNOHO RADOSTI A ÚSPĚCHU S VAŠÍM PENIMASTER®!

Další informace najdete na internetu na stránce www.penis.de

Změny, sloužící technickému pokroku, vyhrazeny. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Stav této informace: 04/2008



МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ МНОГО УДОВОЛЬСТВИЯ И УСПЕХА С ВАШИМ АППАРАТОМ ПЕНИМАСТЕР®!

Дальнейшую информацию Вы найдете в Интернете в www.penis.de

Оставлено за собой право на изменения, способствующие техническому прогрессу. Имеют силу наши Общие условия заключения торговых сделок (AGB). Состояние этой информации на: 04/2008

KOSTENLOSE ERSATZTEILE (GARANTIE)

So erhalten Sie 36 Monate kostenlosen Ersatz auf alle Teile mit Ausnahme der Halteriemern, Komfortbänder und Ersatzteile mit abgelaufener Garantie (s. unsere AGBs):

- Prüfen Sie anhand des Rechnungsdatums, ob Ihr PeniMaster® nicht älter als 3 Jahre ist.
- Senden Sie das defekte Teil zusammen mit einer Kopie der Kaufrechnung ausreichend frankiert an unten stehende Adresse. ODER
- Machen Sie eine gut leserliche digitale Kopie Ihrer Rechnung (z.B. mit einem Scanner) und ein Foto des defekten Teils, auf dem der Defekt deutlich zu erkennen ist. Senden Sie beide Dokumente als .jpg- und/oder .gif-Dateien an: → www.penis.de

HALTERIEMEN, KOMFORTBÄNDER UND ERSATZTEILE MIT ABGELAUFENER GARANTIE

Bitte nutzen Sie zur Bestellung von Ersatzteilen für Geräte ohne Garantieanspruch, Halteriemern oder Komfortbändern folgende Internetadresse: www.penis.de/ersatzteile

REPLACEMENT PARTS FREE OF CHARGE (WARRANTY)

We will provide replacements for all parts for 36 months, except for the fastening belt, comfort bands and spare parts with expired warranty (see our general terms and conditions).

- Check the date on the receipt to make sure your PeniMaster® is no older than 3 years.
- Send the defect part, with sufficient postage, together with a copy of the receipt to the address given below. OR
- Make a clearly legible digital copy of your receipt (e.g. with a scanner) and a photograph of the defect part in which the defect is clearly recognizable. Send both documents as .jpg and/or .gif files to: → www.penis.de

FASTENING BELTS, COMFORT BANDS AND REPLACEMENT PARTS WITH EXPIRED WARRANTY

Please use the following internet address to order replacement parts for devices without warranty, fastening belts or comfort bands: www.penis.de/spare-parts

PIÈCES DE RECHANGE GRATUITES (GARANTIE)

Vous recevez gratuitement pendant 36 mois toutes les pièces de rechange, à l'exception des courroies de maintien, bandes de confort et pièces de rechange dont la garantie a expiré (cf. nos CGV).

- Vérifier au moyen de la date d'émission de la facture si votre PeniMaster® n'a pas été acheté il y a plus de 3 ans.
- Envoyer la pièce défectueuse assortie d'une copie de la facture de vente à l'adresse située ci-dessous (veillez à affranchir suffisamment le pli). O U
- Faites une copie numérique bien lisible de votre facture (par ex. avec un scanner) ainsi qu'une photo de la pièce défectueuse sur laquelle le défaut apparaît clairement. Envoyez les deux documents au format .jpg ou .gif à l'adresse suivante : → www.penis.de

COURROIES DE MAINTIEN, BANDES DE CONFORT ET PIÈCES DE RECHANGE DONT LA GARANTIE A EXPIRÉ

Pour commander les pièces de rechange d'appareils dont la garantie a expiré, les courroies de maintien ou bandes de confort, veuillez utiliser l'adresse Internet suivante : www.penis.de/pièces-de-rechange

PEZZI DI RICAMBIO GRATUITI (GARANZIA)

In questo modo riceverà ogni 36 mesi gratuitamente pezzi di ricambio per tutti i componenti dell'apparecchio ad eccezione di cinghie di tenuta, fasce confort e pezzi di ricambio per i quali sia scaduta la garanzia (si vedano le nostre condizioni generali di affari).

- Verifichi, controllando la data della fattura, che il Suo PeniMaster® non abbia più di tre anni.
- Invi le parti difettose con una fotocopia della ricevuta d'acquisto in busta affrancata con l'importo corretto all'indirizzo di seguito riportato. OPPURE
- Faccia una copia digitale ben leggibile della ricevuta (ad esempio con uno scanner) ed una foto della parte difettosa, dalla quale sia ben riconoscibile il difetto. Invi entrambi i documenti in forma di file .jpg- e/o .gif a: → www.penis.de

CINGHIE DI TENUTA, FASCE CONFORT E PARTI DI RICAMBIO PER LE QUALI SIA SCADUTA LA GARANZIA.

Per ordinare parti di ricambio per apparecchi non in garanzia, cinghie di tenuta o fasce confort utilizzare il seguente indirizzo internet: www.penis.de/pezzi-di-ricambio

PIEZAS DE RECAMBIO GRATUITAS (GARANTÍA)

Así obtendrá piezas de recambio de todas las piezas gratuitamente durante 36 meses, a excepción de las correas de sujeción, las cintas de confort y las piezas de recambio con garantía vencida (ver nuestras CGC):

- Verificar según la fecha de la factura de compra, si su PeniMaster® no tiene más de 3 años.
- Enviar la pieza defectuosa junto con una copia de la factura de compra con porte de correo pagado a la dirección mencionada a continuación: BIEN
- Hacer una copia digital bien legible de su factura (p.ej. con un escáner) y de la foto de la pieza defectuosa donde se vea bien el defecto. Enviar ambos documentos como archivos .jpg y/o .gif a: → www.penis.de

CORREAS DE SUJECIÓN, CINTAS DE CONFORT Y PIEZAS DE RECAMBIO CON GARANTÍA VENCIDA

Para pedir las piezas de recambio para aparatos sin derecho a garantía, correas de sujeción o cintas de confort, utilizar la dirección en Internet siguiente: www.penis.de/piezas-de-repuesto

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO GRATUITAS (GARANTIA)

Assim, obtém 36 meses de substituição de peças, com exceção dos cintos de retenção, da fita de conforto e de peças de substituição com garantia limitada (ver as nossas condições gerais de venda):

- verifique, de acordo com a data da factura, se o seu PeniMaster® não tem mais do que 3 anos.
- envie as peças com defeito juntamente com uma cópia da factura de compra suficientemente franqueada para a morada abaixo referida. O U
- faça uma cópia digital bem legível (que se consiga ler melhor) da sua factura (por ex. com um scanner) e junte uma foto da peça com defeito, na qual se consiga detectar de forma evidente o defeito na peça. Envie os dois documentos como ficheiros .jpg e/ou .gif: → www.penis.de

CINTOS DE RETENÇÃO, FITA DE CONFORTO E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COM GARANTIA LIMITADA

Para encomendar peças de substituição para aparelhos não abrangidos pela garantia, cintos de conforto ou fitas de conforto, utilize o seguinte endereço da Internet: www.penis.de/peças-de-substituicao



TEBRİK EDERİZ!

Sayın Müşterimiz!

PeniMaster`in® satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu alet başansı ispat edilebilir ameliyatsız, ağrısız ve basit bir prensibe dayanan bir metotla erkeğin penisini kalıcı olarak büyütür. PeniMaster`is® bu kullanım kılavuzunda açıklanan talimatlar doğrultusunda uyguladığınızda, penisiniz normal ve de sertleşmiş durumda daha uzun ve daha kalın olacaktır. Ayrıca PeniMaster® istenilmeyen penis eğriliiklerini düzeltmek ve isteğe bağlı olarak sünnet derisini uzatmak (örneğin sünnetli erkeklerde) için de uygundur.

Birçok durumda kan dolaşımının düzeltilmesi ve penis kaslarında yapılan çalıştırma dolayısıyla ayrıca zevk duyguları, sertleşme yeteneği ve cinsel dayanıklılık arttırılmaktadır. PeniMaster`i® kullananlardan birçoğu uzun yıllardan beri iç rahatlığıyla ve huzurlu bir cinsel yaşamı engelleyen komplekslerini yenmiş durumdadır. Bedensel olarak "iyi bir durumda" olmanın bilinciyle de bir eş aramak daha kolay olmaktadır.

PeniMaster`i® başkalarının yardımı olmadan (örneğin bir doktor) rahatlıkla kullanabilirsiniz. PeniMaster® sünnetli ve de sünnetsiz erkeklerde aynı kapsamda başarı sağlamaktadır. PeniMaster® her yaşta kullanılabilen profesyonel bir tıbbi alettir. Buna rağmen penisin doğal uzunluğuna erişmesinin sağlanması için PeniMaster® aletini kullanmaya ancak erginlik çağı tamamlandıktan sonra başlanması tavsiye edilir.

FONKSİYON PRENSİBİ

PeniMaster`in® prensibi çok basittir: Uzunca bir zaman süresi çerçevesinde sürekli olarak çekilmekten etkilenecek penisin hücre dokusunun gelişme yeteneği uyandırılmaktadır. Bu sayede yeni vücut hücreleri oluşur, sonuç olarak penis uzar ve kalınlaşır. Penis eğriliğine yol açan düzensiz doku dağılımları bu alet ile dengelenir. Penis düzleştirilir. PeniMaster® ile sünnet derisi, penisin geri kalan kısmına oranla daha fazla uzatılır. Böylece sünnet derisinin uzatılması istendiğinde bu alet ile sünnet derisinin uzatılması da mümkündür (Kullanım Kılavuzuna bakınız).

Uyarı: Uygulama esnasında penis ince görünse de tedaviye son verildikten sonra penis başlangıçtaki çevre ölçüsüne sahip olur veya daha kalınlaşır.

Bu büyüme prensibinden modern tıbda, da örneğin ortopedi veya cild şirürjisi de yararlanarak özel uzatma ve germe aletleri aletleri olarak kullanılmaktadır.

Penisi sürekli çekerek uzatma düşüncesi yüzyıllardan beri uygulanan bir metottur. Kuzey Uganda'da yaşayan yerli kabile Karamojong ve Hindistan'da yaşayan Sadhular yılları aşan bir süre zarfında penise ağırlık takmaları yöntemiyle müthiş penis boylarına erişmekteydiler (bkz. Britanica Ansiklopedisi; Stern Nr. 49/95).

PENIMASTER`İN® KULLANIMI

KULLANIM

PeniMaster`in® başarı sağlaması bir yandan penis üzerine uygulanan çekim gücüne ve diğer yandan da kullanım süresine bağlıdır. Sadece çekim gücü ve kullanım süresi arasında bulunan denge optimal sonuçlar sağlamaktadır!!
(!) *PeniMaster`i® taşıırken kendinizi genelde daima rahat hissetmeniz, ama kesinlikle acı duymamanız gerekir! Acı duymanız, örneğin çok güçlü ayarlanmış çekme veya tutma güçleri ayar sonucunda, yanlış kullanılmasına ilişkin bir işaretler!*

PENIMASTER`İ® YERLEŞTİRME HAZIRLIKLARI


- Yerleştirilecek yüzeyi tutma demirlerinden çekiniz.
- Tutma kayı,ını yerle, tirme yüzeyinin oyuklarından çekiniz.
ÖNEMLİ: Burada tutma yüzeyinin alt tarafındaki her iki sabitleme kelebeğini aşağıya bastırın. Aksi takdirde tutma kayışı hasar görebilir. Bu aynı zamanda uygulama sonrasında alet söküleceğinde veya penis üzerine etki eden sabitleme kuvveti, tutma kayı,ı bolla, trılarak daha az ayarlanacağında da geçerlidir.
- Hassas ayar vidalarını en alt yüksekliğe ayarlayarak vidalayınız (dolayısıyla vida yivleri görünemeyecek şekilde olsun).
- Aletin doğru toplam uzunluğunu (bu uzunluk sertleşmiş penis uzunluğu artı 1,5 cm'dir), alet ile birlikte teslim edilen uzatma çubuklarını çıkararak veya değiştirerek kendiniz ayarlayınız. Çubukların uzunluğu 2, 4, 6 ve 8 cm'dir ve her birinin iç içe vidalanması mümkündür. Şu uzunluklar mümkündür: 10 cm (çubuklar 8+2); 12 cm (8+4); 14 cm (8+6); 16 cm (8+2+6); 18 cm (8+4+6); 20 cm (8+2+4+6).
! Altı mini çubuk (sevk edildiğinde iki adet 1,5 cm uzunlukta birbirine bağlanmıştır) +0,5, +1,0 veya +1,5 cm uzunluktaki hassas ayar için kullanılır.

PENIMASTER`İN® TAKILMASI

- Elinizle penis yaklaşık 1 dakika süre boyunca gerin. Sarkık penis ek parçadan geçiniz.
- BAĞLAMA VERSİYONU I** – Sünnet derisini daha fazla uzatma: Sünnet derisini daha güçlü veya penis uzamasından çok daha fazla oranda uzatmak (örneğin kaybolan sünnet derisini tekrar kazanmak için) için onfor bandını kalan sünnet derisinin üzerine gerektiğinde penis başına biraz mesafe bırakarak dolayın. Böylece deri daha yoğun şekilde gerilir ve büyümek için daha fazla uyarılır.
BAĞLAMA VERSİYONU II – Sünnet derisini penise doğru orantıda uzatma: Sünnet derisini aynı penisin büyütüldüğü uzunluk kadar uzatmak için sünnet derisini geri çekin ve konfor bandını direkt penis başının arkasında bir pozisyonda penise dolayın. Bu şekilde yapılan bağlamada deri daha az gerilir ve büyüme için bağlamada versiyonu I'dekinden daha az uyarılır.
- Tutma kayışını konfor bandının üzerine, penisin anatomik eğriliği (her iki „kulaklar“ arasında) penis başına bakacak şekilde takın. *Kendinizi rahat hissetmeniz durumunda konfor bandı birkaç kat penis üzerine dolanabilir; aksi takdirde kayış gerektiği şekilde kısaltılacak veya hiç kullanılmayacaktır.*
- Tutma kayışının iki ucunu tekrar takma yüzeyinin yanlarına geçirin. Derinin sıkışmasını önlemek amacıyla penis ve takma yüzeyi arasına parmağınızı koyun ve kayışın uçlarını sıkıca sıkın ve sonra parmağınızı çıkarın.
- Penis bu durumda tutma yüzeyinde güvenli şekilde sabitlenmiştir.
(!) *Penisi aşırı şekilde ezmemeye dikkat ediniz!* Penis veya penis başının rengi değiştiğinde derhal tutma kayışını açın ve penise masaj uygulayarak kan dolaşımını sağlayın. Özellikle ilk günlerdeki alıştırma sürecinde, penisin dış görünümünde ve fonksiyonunda, herhangi olumsuz değişikliği meydana gelip gelmediğini gözlemleyin ve gerektiğinde semptomlar geçinceye kadar kullanıma ara veriniz.
- Tutma yüzeyini, gerili olan penis ile birlikte çubuklar üzerine bastırın.
- Aleti isterseniz vücudunuzdan aşağıya isterseniz yukarıya doğru taşıyabilirsiniz, her iki durumda da aynı sonuca erişeceksiniz.
- PeniMaster`in® çekim gücünü vida yivini dışarı çevirerek ayarlayınız („Çekim gücünün ayarlanması“ bölümünde açıklanan bilgilere bakınız).

ÇEKİM GÜCÜNÜN AYARLANMASI

Tutucu çubukların sonunda 5`ER KEZ KERTİK VURULMUŞ OLAN DEMİR ÇUBUKLAR BULUNMAKTADIR. Bunlar yaylı terazi prensibi gereğince, peniste meydana gelen çekim gücünü belirtmektedir:

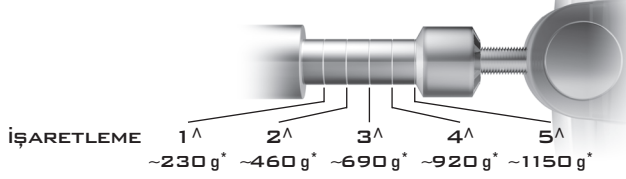

Yaylı terazinin okunmasına ilişkin örnek:

Örneğin alet yerleştirildikten sonra, 5 kertiğten sadece 3`ü görülebilecek şekilde yaylarınsa, ayarlanmış olan çekim gücü 460 ve 690 gram arasında olmaktadır. Yalnızca son kertiği görebildiğinizde, çekim gücü 920 ve 1150 gram arasında olmaktadır.

Uyarı: Cıvata dışı ancak, penis doğru çubuk uzunluğu (yukarıya bakınız) seçimi sonucunda hafifçe gerildiğinde dışarı döndürülecektir. Aksi takdirde herhangi bir çekim gücü oluşturulmaz veya oluşturulan çekim gücü yeterli değildir! Alete kolay alışabilmek için uygulama başlangıcında çekim gücünü çok küçük olarak (örneğin 0 gram ve 230 gram arası) ayarlayın. Bu alışma safhası iki haftaya kadar sürebilir. Mümkün olan en yüksek çekim gücünü ayarlayarak aleti herhangi bir sorun yaşamadan 60-90 dakika boyunca taşıyarak penisinizi bu uygulamaya mükemmel şekilde alıştırebilir ve uygulama antrenmanları yapabilirsiniz.

Uyarı: Belirli bir süre sonra penisiniz uzadığında ve çekim gücü bu nedenle etkisiz kaldığında çekim gücünü ayarlayın! Çekim gücünü kullanılan haftalar boyunca sadece bir kertik görününceye kadar yavaşça yükseltin. Ağrı hissetmeniz durumunda PeniMaster® aletinin ayarını tekrar azaltın!

AŞIRI VE AĞRI VERİCİ TUTMA VE ÇEKİM GÜCÜ AYARLARI HÜCRE DOKUSUNUN BÜYÜMESİNE NEGATİF ETKİDE BULUNABİLİR!

[!] 1150 gramdan fazla çekim gücüne emniyet açısından, bu ayarda herhangi sorununuzun olmayacağıni düşünseniz bile, ayarlamamanız gerekir.

TAŞIMA SÜRESİ

PeniMaster® günde en az 3 saat takılı bırakılacaktır. Daha uzun taşıma süreleri sonucu iyileştirecektir! 60 ile 90 dakika taşıma süresinden sonra 15 dakikalık mola verin ve kan dolaşımını sağlamak için penise masaj yapın. Verilecek bu kısa molalar penisin büyümesini teşvik edecektir!

PeniMaster® aletini alışma süresinden sonra geniş, bir pantolon içinde günde istediğiniz süre kadar (daima her 60 ile 90 dakika arasında mola vermeyi ihmal etmeyin!) takabilirsiniz. Günde 6 saat veya üzerindeki taşıma süreleri mükemmel büyüme sonuçlarının elde edilmesini sağlar. Genel olarak PeniMaster® aletini azami olarak kaç ay takabileceğiniz ile ilgili bir sınırlama yoktur. Hatta: PeniMaster® aletini ne kadar uzun süre kullanırsanız sonuç ta o kadar kesin olur.

Görülebilen en küçük bir başarının elde edilebilmesi için alet, bir ay boyunca günde en az 3 saat takılmalıdır. İlk dört hafta hafta içinde elde edilen başarı kısmen doku genişlemesine bağlı bir başarıdır ve elde edilen bu başarı kalıcı olmayabilir. Uyku esnasında taşıma molaları verilemeyeceğinden aletin uyurken takılması tavsiye edilmez. Sadece aleti takacak yeterli zaman bulamadığınızda ve yeterli taşıma saatlerine erişemediğinizde aletin uykuda takılması konusunu gözden geçirebilirsiniz. Aleti uykuda takmadan önce kullanıcı, aleti doğru ayarlama konusunda yeterli tecrübeye sahip olmalı ve uyanık durumdayken birkaç saat aleti taşıyarak tecrübe sahibi olmuş olmalıdır.

Örneğin seyahatte olmanız nedeniyle PeniMaster`i® bazen birkaç gün veya daha uzun bir süre taşıyamadığınız durumlarda, iyi bir sonucu ulaşmanız açısından endişelenmeyiniz: O zamana kadar geliştirdiğiniz büyüme kalıcıdır ve yeniden tedaviye devam ettiğinizde gelişme devam eder. Ve şunu da unutmayınız, bu metotla penisin **büyümesi** gerçekleştirilmektedir – ve bu da doğal olarak zamana ihtiyaç duymaktadır! Dolayısıyla güven duyunuz ve bir kaç günden sonra henüz bir netice göremediğiniz durumda, sabrınızı kaybetmeyiniz: Dayanıklılığınız daha uzun bir penisle mükafatlandırılacaktır!

HİJYEN TALİMATI

PeniMaster`in® aletinden uzun süre memnun kalmanız için lütfen, penis ve PeniMaster`in® kullanmadan önce ve sonra ılık su ve sabun ile temizleyin. Penis ve aleti daha sonra iyice kurulayınız. Bu davranış genelde sağlığa yararlı ve iltihaplanmaların engellenmesine yardımcı olmakta ve penisin tutma kayışı tarafından daha iyi sabitlenmesini sağlamaktadır. Aksi takdirde kayış vücut yağı, pudra veya yağlı ürünler nedeniyle penis üzerinden daha hızlı şekilde kayacaktır.

Alet paslanmazdır ve su ile irtibat ettiğinde herhangi bir hasar oluşmaz.

KULLANIMLA İLGİLİ EMNİYET YÖNTEMLERİ VE İKAZ İŞARETLERİ

PeniMaster`in® kullanımından meydana gelen kalıcı yan etkilere rastlanmamıştır. Kullanım esnasında tutucu lastiklerin bölgesindeki cildin kan dolaşımının küçük çapta değişmesi dolayısıyla, hafif olarak ilgili bölgenin kızarması normaldir. Bunlar ağrı vermemektedir ve PeniMaster`i® çıkardıktan sonra çabuk girelmektedir.

PeniMaster`i® çıkardıktan sonra, cildi rahatlatmak için penis bir nemlendirici losyonla kremlemek uygun olabilir.

Lütfen yine de aşağıda belirtilen emniyet kurallarına ve ikaz işaretlerine dikkat ediniz:

PENIMASTER`İN® AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARDA KULLANILMASINA İZİN VERİLMEMİŞTİR.

- alkol kullanıldığında
- Uyuşturucu kullanıldığında
- sakinleştirici maddelerin etkisi altında
- uyku ilaçları etkisi altında ve ağrı duyularını uyuşturan ilaçların etkisi altında
- bilinen krom alerjisinde ve polikarbonat (PC) ve TPE`ye aşırı hassasiyet olduğunda
- Peniste, haya torbası veya idrar yollarında genel olarak bilinen sorunlarda
- damar-veya bağdokusu yetersizliği gibi diğer hastalıklarda
- peniste veya haya torbasında halen mevcut ağrılar olduğunda
- Penis protezleri kullanıldığında

PeniMaster`in® uygulanması esnasında penis, haya torbası veya penis başı fonksiyonunda ani ağrı,doku renginin değişmesi veya diğer dış iritasyonlar gibi değişiklikler meydana geldiğinde uygulamaya derhal ara verilecek ve ancak bu şikayetler sona erdikten sonra devam edilecektir. Ara verildikten sonra bu semptomlar kaybolmadığında veya arttığında, ihtiyaten bir doktora (üroloğa) gitmeniz tavsiye edilir. Bedensel kısıtlamalar veya bilinen bir hastalık dolayısıyla sizin için PeniMaster`in® kullanımı ve uygunluğu açısından emin olmadığınızda, kendiniz uygulamadan önce lütfen doktorunuza (üroloğunuza) danışınız.